

FREE EAR® OHRKISSEN UND FREE EAR® TUNNEL-BAUCLAGEKISSEN


Die Nähte sind vollständig geschweißt und bakteriendicht; der atmungsaktive Filter stößt Feuchtigkeit ab und ist luftdurchlässig.



Mit dem innovativen Free Ear® Ohrkissen ist das Ohr frei gelagert.

Free Ear® Ohrkissen

Gefüllt mit silikonisierten Hohlfasern. Diese sind elastisch und eignen sich sehr gut zum Auffangen von Druck

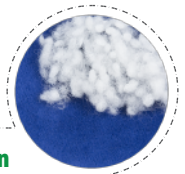

Free Ear® Tunnel-Bauchlagekissen

Gefüllt mit EPS-Perlen. Die Kombination aus Luft und Perlen mindert den Druck.



DAS FREE EAR®

Das innovative Free Ear® Ohrkissen von REBACARE® ist patentiert und sorgt für eine Freilagerung des Ohrs. Der Einsatz dieser Kissen trägt zu besseren Prävalenzwerten Ihrer Einrichtung bei.

- Entspricht der EPUAP-Norm
- Mit CE-Gütesiegel
- Hygienisch in der Verwendung
- Die Nähte sind vollständig geschweißt und feuchtigkeits- und bakteriendicht.
- Der atmungsaktive Filter stößt Feuchtigkeit ab und ist luftdurchlässig.
- Verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Produkt
- Kann mit 70% igem Alkohol, 1000 ppm Chlor, OxyFoam und OxyWipe gereinigt werden
- Entspricht den WIP-Richtlinien
- Die weichen Stretchbezüge sind waschbar bei 60 Grad und die Bezüge aus 100% Baumwolle bei 95 Grad

DAS FREE EAR® KANN EINGESATZT WERDEN IN:

- privater Pflege
- Pflegezentren

- Pflegeheimen
- Krankenhäusern
- Intensivstationen

INDIKATIONEN:

- Dekubitus am Ohr
- Chondrodermatitis Nodularis Helicis
- Sauerstoffschlauch entlang des Ohrs
- Sondenernährung oder Maske am Gesicht
- Hörgerät
- Tunnel-Bauchlagekissen für Patienten unter Beatmung

Beschreibung: Free Ear® Ohrkissen

Größe: 50 x 65 cm

Artikelnummer: 7776

Artikelnummer Bezug: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

Beschreibung: Free Ear® Tunnel-Bauchlagekissen

Größe: 50 x 65 cm

Artikelnummer: 7776 T

Artikelnummer Bezug: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

